


Ръководство за употреба Дрегер за алкохол Tracer EZ-1

ЧАСТИ НА УРЕДА

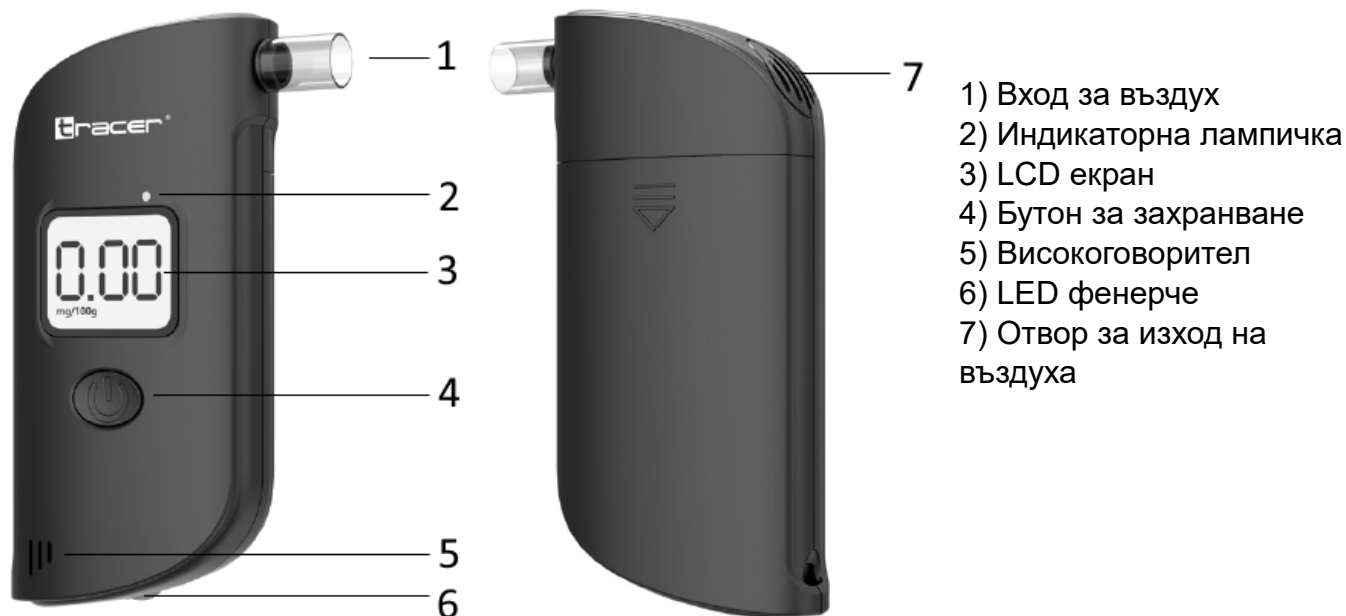

Съкращения:

BAC – Blood Alcohol Concentration – концентрация на алкохол в кръвта

BrAC – Breath Alcohol Concentration – концентрация на алкохол в издишания въздух.

Благодарим ви, че закупихте дрегера. Моля, прочетете внимателно това ръководство за потребителя. Това ще ви позволи да използвате пълните възможности на устройството и да го използвате правилно. Моля, пазете това ръководство на достъпно място, в случай че ви потрябва в бъдеще.

Преди да включите продукта за първи път, моля, прочетете внимателно следните точки:

- 1. Устройството не трябва да се счита за решаващ фактор при определяне дали да шофирате след консумация на алкохол.**
- 2. Резултатите от теста дават обща индикация и трябва да се третират като общи насоки.** Дори при еднаква консумация на алкохол и концентрация на алкохол в кръвта, нивата на интоксикация могат да варират в зависимост от индивидуалното физическо състояние и различията между участниците в теста.
- 3. Независимо дали този дрегер се използва за тестване, нито производителят, нито продавачът носят отговорност за шофиране под въздействието на алкохол или други законово забранени действия.**
- 4. Абсорбцията на алкохол в кръвния поток отнема приблизително 20 минути.** Поради това се препоръчва тестът да се извърши след около 20 минути. Ако тестът се проведе веднага след консумация на алкохол, резултатите може да не отразяват точно концентрацията на алкохол в кръвта.
- 5. За да получите по-точни показания, интервалът между измерванията трябва да е по-дълъг от 3 минути.**
- 6. Не разглобявайте и не мийте устройството.**

7. При измерване с нисък заряд на батерията може да има несъответствие между резултата от теста и действителната стойност. Уверете се, че батериите AAA са имат достатъчно заряд.
8. Съхранявайте устройството далеч от пряка слънчева светлина и отоплителни уреди.

ПОДГОТОВКА ПРЕДИ УПОТРЕБА

1. Пригответе 3 батерии 1,5 V (AAA), извадете капака на батериите, поставете батериите и поставете капака обратно. Батериите не са включени в комплекта!
2. Натиснете бутона за захранване.
3. Устройството ще се загрее за приблизително 0-10 секунди, последвано от 10-секундно обратно броене - изчакайте, докато процесът на загряване приключи.
4. След загряване устройството автоматично ще започне 6-секундно обратно броене за издишване на въздух. След като издишате равномерно с необходимата продължителност, изчакайте да се появят резултатите от теста.
5. След като завършите стъпки 2, 3 и 4, резултатът ще се появи на дисплея в рамките на 5 секунди.
6. Настройка на мерната единица: Натиснете веднъж, за да превключвате между различни мерни единици (% BAC / mg/L BrAC).
7. За да включите аварийната LED светлина, дрегерът трябва да е изключен, натиснете бързо двукратно бутона за захранване. Ако дрегерът се използва за първи път след изваждане от опаковката или не е бил използван задълъг период, газове и други замърсители може да са се натрупали върху сензора. В такъв случай натиснете бутона за захранване няколко пъти, за да изчистите дрегера, като го загреете предварително.

ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА

1. Натиснете и задръжте бутона за захранване за около 2 секунди. Ще се чуе звуков сигнал и дисплеят на устройството ще се включи.
2. Устройството ще влезе в режим на загряване. Екранът ще започне обратно броене от 10 до 0, след което дрегерът ще бъде готов за тестване.

ПРОЦЕДУРА НА ТЕСТВАНЕ

1. След загряване, преминете към фазата на издишване. Екранът ще покаже 6-секундно обратно броене. Духайте равномерно в поставения мундщук за около 5 секунди, докато чуете звуков сигнал. Малко след това ще се покаже резултатът от теста.
2. Числовият резултат ще бъде придружен и от съответен LED светлинен индикатор.

Зелена светлина - В допустимите граници

Ако резултатът от теста е $< 0,3$ г/л, светва зелената светлина.

Ако резултатът от теста е $< 0,030\%$ BAC, светва зелената светлина.

Ако резултатът от теста е $< 0,15$ мг/л, светва зелената светлина.

Жълта светлина и алармен звук - Открита е консумация на алкохол

Резултатът от теста е в диапазона от $\geq 0,3$ г/л до $< 0,8$ г/л.

Резултатът от теста е в диапазона от $\geq 0,030\%$ BAC до $< 0,080\%$ BAC.

Резултатът от теста е в диапазона от $\geq 0,15$ мг/л до $< 0,25$ мг/л.

Червена светлина и алармен звук - Състояние на интоксикация

Резултатът от теста надвишава $\geq 0,8$ г/л.

Резултатът от теста надвишава $\geq 0,080\%$ BAC.

Резултатът от теста надвишава $> 0,25$ мг/л

МЕРНИ ЕДИНИЦИ

Мерни единици, използвани в различни държави:

- 1 мг/100 мл - Китай
- % ВАС – САЩ
- г/л - Европа
- мг/л ВrAC - Япония

0,05% ВАС означава 0,05 г (50 мг) алкохол на 100 мл кръв.

ВАС - Концентрация на алкохол в кръвта					BrAC - Концентрация на алкохол в издишан въздух	
	мгр/100мл	%	‰	гр/л	мгр/л	PPM – частици на милион
1	10	0.01	0.1	0.1	0.05	25
2	20	0.02	0.2	0.2	0.10	50
3	30	0.03	0.3	0.3	0.15	75
4	40	0.04	0.4	0.4	0.20	100
5	50	0.05	0.5	0.5	0.25	125
6	60	0.06	0.6	0.6	0.30	150
7	70	0.07	0.7	0.7	0.35	175
8	80	0.08	0.8	0.8	0.40	200
9	90	0.09	0.9	0.9	0.45	225
10	100	0.10	1.0	1.0	0.50	250
11	110	0.11	1.1	1.1	0.55	275
12	120	0.12	1.2	1.2	0.60	300
13	130	0.13	1.3	1.3	0.65	325
14	140	0.14	1.4	1.4	0.70	350
15	150	0.15	1.5	1.5	0.75	375
16	160	0.16	1.6	1.6	0.80	400
17	170	0.17	1.7	1.7	0.85	425
18	180	0.18	1.8	1.8	0.90	450
19	190	0.19	1.9	1.9	0.95	475
20	200	0.20	2.0	2.0	1.00	500

ИМАТЕ СЪМНЕНИЕ ЗА НЕИЗПРАВНОСТ?

Преди да заявите замяна или връщане, проверете следното:

1. Излиза ли силна миризма от сензора?

- Натиснете бутона за захранване и издухайте въздух повече от 3 пъти, за да почистите сензора.

2. Тестът проведен ли е на място с осезаеми миризми?

- Сменете мястото преди тестване.

3. Тестът проведен ли е веднага след консумация?

- Извършете теста отново 20 минути след консумация.

4. Тестът не е завършен:

- Издишването твърде слабо ли е? Опитайте да издишате по-енергично и равномерно.
- Мундшукът твърде далеч ли е от устата? Позиционирайте устройството правилно.
- Тестът проведен ли е на ветровито място? Преместете се на друго място преди тестване.

5. Неопределена грешка:

- Тестът проведен ли е на ветровито място? Преместете се на друго място преди тестване.
- Тестът проведен ли е на място със силни миризми? Сменете мястото преди тестване.

6. Не съм пил, но резултатът показва алкохол:

- Остатъци от алкохол може да се натрупат във вътрешността на сензора за алкохол и във всмукателния отвор за въздух. Натиснете бутона за захранване и издухайте въздух повече от 3 пъти, за да почистите сензора.
- Ферментационните газове, произведени в тялото, могат да реагират със сензора.

7. Натискането на бутона за захранване не включва дисплея:

- Батерията изтощена ли е? Опитайте да смените батериите с нови.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Потребявана енергия	120mA
Батерия:	3x AAA 1.5V
Напрежение:	4.5V
Температурен диапазон:	-20°C~50°C
Тип на сензора:	Полупроводников сензор
Обхват на измерване на алкохолна концентрация	0-200mg/100мл
Размери:	90 x 47 x 23 мм
Тегло:	45гр



Символът със зачеркнато кошче означава, че продукта не трябва да се изхвърля с битовия отпадък, тъй като представлява електронен отпадък. Потърсете информация за пунктовете, които приемат електронно оборудване и го предайте там. Или се свържете с продавача за информация.

Декларация за съответствие и ръководство за употреба на
www.mediatrade-bg.com

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат поправени, сменени или покупната стойност възстановена за сметка на доставчика.

Доставчикът си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки,

“Медиа Трейд“ ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или възстановяване на покупната стойност от документа за покупка.